

Motic®

MORE THAN MICROSCOPY



RED
LINE

REVOLUTIONARY EDUCATIONAL DESIGN



De RED-Line is een begrip in microscoop land. Motic, als toonaangevende fabrikant van microscopen, heeft zeer goed geluisterd naar de specifieke wensen van de educatieve markt. Gebruikers hebben behoefte aan betrouwbare en gebruiksvriendelijke instrumenten, om hun eerste stappen in 'de wereld van de kleine dingen' te zetten. Met inachtneming van deze specifieke eisen wordt in deze catalogus een compleet nieuwe lijn biologische - en stereomicroscopen gepresenteerd. Nieuwe verlichtingstechnieken en andere slimme ideeën met het oog op jonge gebruikers zijn doorgevoerd om het lesgeven met microscopen eenvoudiger en doeltreffender te maken.

REVOLUTIONARY EDUCATIONAL DESIGN



Opnieuw is Motic de concurrent een paar stappen voor door instrumenten van hoge kwaliteit aan te bieden voor een gunstige prijs. Onze **garantieperiode van 10 jaar** wordt ondersteund door een complete onderdelenvoorraad die nog lang na de garantieperiode beschikbaar zal zijn. Een Motic microscoop is daarom een solide investering die garant staat voor jarenlang probleemloos en effectief werken.

REDLINE CATALOGUS INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE	02
RED100 SERIE	04
RED200 SERIE	10
RED30 SERIE	16
MOTICAM SERIE RED50X	22



RED100 SERIE

DE RED100 SERIE IS DE IDEALE MICROSCOPENLIJN VOOR BASIS -, VOORTGEZET - EN HOGER ONDERWIJS



Dat de Motic RED100 serie zich volledig op het onderwijs richt is al te zien aan de kop van de microscoop. Afhankelijk van budget en onderwijssituatie zijn er monoculaire, dual view en binoculaire opties beschikbaar. Om opbergen te vergemakkelijken kan de tubus 180° worden gedraaid. De verzonken borgschroef kan niet worden verwijderd door leerlingen.

De handig gepositioneerde scherpstelknoppen worden gemakkelijk gevonden door met de hand de kromming van het statief te volgen. Een gemakkelijke zithouding laat een intuïtieve analyse van het preparaat toe middels het coaxiale grof/fijn instelmechaniek. De comfortabele draagbeugel aan de achterzijde van het statief vereenvoudigt het opbergen en transporteren.

Het lenzensysteem is een belangrijk onderdeel van de microscoop. Motic rust de RED100 serie uit met de EA objectieven van hoge kwaliteit; achromaten met goede kleurweergave, contrast en tegelijkertijd een goede vlakheid van het beeld: vlakke preparaten, zoals doorsneden en smeersels kunnen snel en effectief worden geanalyseerd.

De omgekeerde positie van de revolverplaat biedt veel ruimte voor het plaatsen of verwisselen van de preparaatglaasjes, met minder kans op beschadiging van het preparaat of de objectieven.

De standaard WF 10X/18mm oculairs werken perfect samen met de EA achromaten. In binoculaire uitvoering kunt u de dioptrie aanpassen op het linker oculair. Iedere RED100 is standaard uitgerust met een aanwijznaald in het oculair, zodat de docent interessante gebieden kan aanwijzen aan de leerling. Ook de oculairs zijn uitgerust met verzonken borgschroeven, om ongewenst verwijderen te voorkomen.

Alle RED100 microscopen zijn uitgerust met snoerloze oplaadbare LED verlichting. Juist in een onderwijssituatie biedt LED licht voordelen ten opzichte van de traditionele halogeenlampjes: langere levensduur (>10.000 uur), geen hitteontwikkeling (dus verhoogde veiligheid in gebruik), minder energieverbruik (na opladen ca. 70 gebruiksuren) en een moderne kleurwaarneming zonder correctief blauwfilter.

RED100 SERIE

- > Horizontaal verstelbare objecttafel met ‘one touch’ preparaat klemmen of geïntegreerde kruistafel met preparaathouder
- > Hoge kwaliteit EA objectieven
- > LED verlichting



RED100

RED101

RED120

RED130

RED131

RED132



REVOLVERKOP			REVOLVERKOP		
Drievoudig	•	•	Drievoudig	•	•
Viervoudig			Viervoudig	•	•
TAFEL			TAFEL		
Draaibaar	•	•	Draaibaar	•	•
Kruistafel			Kruistafel	•	•
SCHERPTEREGELING			SCHERPTEREGELING		
Grof en fijn	•	•	Grof en fijn	•	•
Coaxiaal			Coaxiaal	•	•

SPECIFICATIES	RED100	RED101	RED120	RED130	RED131	RED132
Optisch systeem						
160 mm tubus	●	●	●	●	●	●
Tubus						
Monoculair	●		●	●		
Dual view monoculair		●			●	
Siedentopf binoculair						●
Inkijkhoek						
45° gekanteld, 360° draaibaar	●		●	●		
30° gekanteld en vertikaal, 360° draaibaar		●			●	
30° gekanteld, 360° draaibaar						●
Pupilafstand						
55-75 mm						●
Dioptrie correctie						
Op linker tubus, + of – 5 dioptrie						●
Oculairs						
WF 10X/18 mm met aanwijsnaald en borging	●	●	●	●	●	●
Revolverkop						
Omgekeerd drievoudig, vastklikkend	●	●				
Omgekeerd viervoudig, vastklikkend			●	●	●	●
EA Achromatische objectieven (DIN)						
4X/0,10 – 10X/0,25 – 40X/0,65/S	●	●				
4X/0,10 – 10X/0,25 – 40X/0,65/S – 100X/1,25/S-Olie			●	●	●	●
Tafel						
Horizontaal verstelbare tafel met ‘one touch’ preparaatklem	●	●				
Geïntegreerde kruistafel met preparaat-houder, 77x25 mm X/Y verplaatsing			●	●	●	●
Tafel formaat						
110mm x 110mm	●	●				
120mm x 120mm			●	●	●	●
Condensor						
0,65 N.A. condensor met irisdiafragma	●	●				
1,25 N.A. Abbecondensor met irisdiafragma			●	●	●	●
Scherpteregeling						
Gescheiden grof- en fijnregelknoppen met instelbare stroefheid	●	●	●			
Coaxiale grof- en fijnregelknoppen met instelbare stroefheid				●	●	●
Fijnscherpstelling						
Stappen van minimaal 2 µm	●	●	●	●	●	●
Z-as beweging						
7mm			●	●	●	●
13mm	●	●				
Verlichting						
Snoerloos LED 20mA, 3,5V, 70mW, instelbaar	●	●	●	●	●	●

ACCESSOIRES

RED100 SERIE



OCULAIRES (PER STUK)
Huygens oculair H5X/14,5mm
Widefield oculair WF 10X/18mm
Widefield oculair WF 15X/12mm
Widefield oculair WF 20X/11mm

MICROMETER OCULAIRES
Micrometer oculair WF10x18mm, 10mm verdeeld in 100 delen, met draadkruis

MICROMETERPLAATJE
Micrometerplaatje, 10mm verdeeld in 100 delen, met draadkruis (Ø19mm)
Houder voor micrometerplaatje voor 18mm oculair

ACHROMATISCHE OBJECTIEVEN - EA
Achromatisch objectief EA 4X/0,10
Achromatisch objectief EA 10X/0,25
Achromatisch objectief EA 20X/0,40
Achromatisch objectief EA 40X/0,65/S
Achromatisch objectief EA 60X/0,85/S
Achromatisch objectief EA 100X/1,25/S – Olie

ACHROMATISCHE OBJECTIEVEN – MET BORGING
Achromatisch objectief 4X/0,10
Achromatisch objectief 10X/0,25
Achromatisch objectief 40X/0,65/S
Achromatisch objectief 100X/1,25/S – Olie

RESERVE ONDERDELEN
Stofhoes (maat B)
Aluminium opbergkoffer
Immersie olie (5ml)

RESERVELAMPEN
LED 20mA, 3,5V, 70mW

RED200 SERIE

DE RED200 SERIE IS ONTWERPEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS,
DOCENTEN EN LABORATORIA



De RED200 serie is uitgerust met de comfortabele Siedentopf kop met een instelbare pupilafstand van 55 – 75 mm. Om zichtproblemen te compenseren kunt u op het linker oculair een dioptrische correctie van ± 5 ingeven.

Het geavanceerde karakter van de RED200 serie komt ook tot uiting in het grote en zware microscoopstatief dat betere stabiliteit biedt, zeker wanneer een camera is gemonteerd. De grote coaxiale focusknoppen zijn gemakkelijk bereikbaar; de fijnafstelling stelt in met stappen van minimaal $2\text{ }\mu\text{m}$ voor vloeiend en precies bekijken 'door het preparaat heen'.

De snoerhanger aan de achterzijde van de microscoop is handig tijdens transport of opslag: gewoon de kabel opwinden.

De RED200 serie heeft ook verbeteringen op het gebied van optische prestatie. Motics Semi-Plan (SP) objectieven leveren een superieur contrast met een glashelder beeld over een groot gezichtsveld (20mm). Alle microscopen zijn uitgerust met een set objectieven van 4X, 10X, 40X en 100X/Olie om het gangbare scala aan vergrotingen af te dekken. Uiteraard zijn de 40X en 100X-Olie objectieven uitgerust met een geïntegreerd veermechaniek, om schade aan de lens of het preparaat te voorkomen.

Om uw microscoop in te zetten bij presentaties, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden, raden wij een trinoculair model aan. De RED223 en RED233 zijn standaard uitgerust met een 0,5X c-mount adapter voor de bevestiging van een digitale camera.

RED200 SERIE

- > Uiterst precieze coaxiale scherpteregeling
- > Nieuwe Semi Plan objectieven
- > Koehler verlichting
- > Regelbare lichtintensiteit



CONDENSOR					CONDENSOR
Focuseerbaar	•	•	•	•	Focuseerbaar
Focuseer- en centreerbaar				•	Focuseer- en centreerbaar
VERLICHTING					VERLICHTING
3W LED	•	•	•	•	3W LED
Koehler 3W LED				•	Koehler 3W LED

SPECIFICATIES	RED211	RED220	RED223	RED230	RED233
Optisch systeem					
160 mm tubus	●	●	●	●	●
Tubus					
Monoculair	●				
Siedentopf binoculair		●		●	
Siedentopf trinoculair (inclusief 0,5X c-mount adapter)			●		●
Inkijkhoek					
30° gekanteld, 360° draaibaar	●	●	●	●	●
Pupilafstand					
55-75mm		●	●	●	●
Dioptrie correctie					
Op linker tubus, +/- 5 dioptrie		●	●	●	●
Oculairs					
WF10X/20mm	●	●	●	●	●
Revolverkop					
Omgekeerde viervoudige revolverkop, vastklikkend	●	●	●	●	●
Achromatische Semi Plan objectieven – SP					
4X/0,10 – 10X/0,25 – 40X/0,65/S – 100X/1,25/S-Olie	●	●	●	●	●
Tafel					
Geïntegreerde kruistafel met preparaathouder en 77x50mm X/Y verplaatsing	●	●	●	●	●
Formaat tafel					
140 x 135mm	●	●	●	●	●
Condensor					
1,25 N.A. Abbe condensor met iris diafragma	●	●	●		
1,25 N.A. Abbe condensor met iris diafragma, focuseer- en centreerbaar				●	●
Scherpteregeling					
Coaxiale grof- en fijnregelknoppen met instelbare stroefheid	●	●	●	●	●
Fijnscherpstelling					
Stappen van minimaal 2 µm	●	●	●	●	●
Z-as beweging					
13mm	●	●	●		
19mm				●	●
Verlichting					
LED 3W met intensiteitsregeling	●	●	●		
LED 3W Koehler met intensiteitsregeling				●	●

ACCESOIRES

RED200 SERIE



- OCULAIRS (PER STUK)**
Huygens oculair H5X/14,5mm
Widefield oculair WF10X/20mm
Widefield oculair WF15X/12mm
Widefield oculair WF20X/11mm
- MICROMETER OCULAIRS**
Micrometer oculair WF10X/20mm, 10mm verdeeld in 100 delen, met draadkruis
- MICROMETERPLAATJE**
Micrometerplaatje, 10mm verdeeld in 100 delen, met draadkruis (Ø21mm)
Houder voor micrometerplaatje voor 20mm oculair
- ACHROMATISCHE SEMI PLAN OBJECTIEVEN - SP**
Achromatisch Semi Plan objectief SP 4X/0,10 (WD=17mm)
Achromatisch Semi Plan objectief SP 10X/0,25 (WD=6,4mm)
Achromatisch Semi Plan objectief SP 20X/0,40 (WD=0,73mm)
Achromatisch Semi Plan objectief SP 40X/0,65/S (WD=0,45mm)
Achromatisch Semi Plan objectief SP 60X/0,85/S (WD=0,1mm)
Achromatisch Semi Plan objectief SP 100X/1,25/S – Olie (WD=0,14mm)
- PLAN ACHROMATISCHE OBJECTIEVEN - PL**
Plan achromatisch objectief PL 4X/0,10 (WD=17mm)
Plan achromatisch objectief PL 10X/0,25 (WD=1,5mm)
Plan achromatisch objectief PL 20X/0,40 (WD=0,55mm)
Plan achromatisch objectief PL 40X/0,65/S (WD=0,4mm)
Plan achromatisch objectief PL 60X/0,85/S (WD=0,1mm)
Plan achromatisch objectief PL 100X/1,25/S – Olie (WD=0,15mm)
- POLARISATIESET**
Polarisatieset B.209NT
Roterende tafel
- FOTO EN C-MOUNT CAMERA ADAPTERS**
0,5X c-mount camera adapter voor 1/3” en 1/2” chip sensoren
0,65X c-mount camera adapter voor 2/3” chip sensoren
1X c-mount adapter (geen lens)
Foto adapter (te gebruiken met één van onderstaande foto oculairs)
2,5X foto oculair (te gebruiken met foto adapter)
4X foto oculair (te gebruiken met foto adapter)
- RESERVE ONDERDELEN**
Oogkapjes (per paar)
Stofhoes (maat C)
Immersieolie (5ml)
Aluminium opbergkist
Snoerhanger (per paar)
- RESERVE LAMPJES**
LED licht unit 3W

RED30 SERIE

EEN SERIE STEREOMICROSCOPEN MET UITMUNTENDE PRESTATIES;
IDEAAL VOOR DE EERSTE STAPPEN IN DE WERELD VAN MICROSCOPIE



Stereomicroscopen zorgen voor een eenvoudige toegang tot microscopie. Er hoeft geen preparaat te worden voorbereid: pluk gewoon een bloem uit de schooltuin of pak een insect uit de vensterbank. De lagere vergrotingsfactoren geven een beter begrip van de dimensie, een rechtopstaand beeld helpt in de oriëntatie.

De RED30S van Motic heeft een tweetraps vergroting voor zowel totaaloverzicht als gedetailleerde informatie. Een comfortabelere benadering krijgt u met de 1:3 zoomfactor van de RED39Z. Beide microscopen zijn uitgerust met op- en doorvallend LED licht voor heldere, witte en gelijkmatige verlichting. Alle voordelen van LED verlichting vindt u hier terug: helder licht, lange levensduur, geen warmte ontwikkeling voor de veiligheid van gebruiker en levende objecten.

Het doorvallend licht zit ingebouwd in de grote voet van de microscoop maar met minimale hoogte: u kunt het object gemakkelijk bewegen terwijl uw handen op het tafelblad rusten. De verlichtingsunit is volledig afgesloten zodat eventueel gemorste vloeistoffen niet in contact komen met de verlichting. U kunt dus zonder risico watermonsters bekijken. Wanneer u een preparaat wilt bekijken helpt het handige Motic 'one touch' preparaatklemstelsel u om het vast te zetten.

Het opvallend licht is speciaal voor niet-transparante objecten zoals mineralen, fossielen of planten. Omdat op- en doorvallend licht onafhankelijk kunnen worden ingesteld, kan een optimale belichting voor ieder object worden verkregen. Het snoerloze principe van de LED verlichting met oplaadbare accu's is ideaal voor veldwerk. De grote draagbeugel en de lichte constructie van het instrument maken hem ook geschikt voor jongere leerlingen.

De RED-Line stereomicroscopen hebben een betrouwbare mechaniek gecombineerd met uitstekende optiek en gebruiksvriendelijke LED verlichting. Een mooie combinatie die indrukwekkende beeldresultaten geeft en daardoor een aangename kennismaking is met de wetenschap.

RED30 SERIE

- > Gebruiksvriendelijk ontwerp
- > Geïntegreerde LED verlichting
- > Draagbeugel voor gemakkelijk transporteren



RED30S



RED39Z

TUBUS		
Binoculair, inkijkhoek 45° gekanteld	•	
Binoculair, inkijkhoek 45° gekanteld, 180° draaibaar		•
OBJECTIEVEN		
Draaiobjectief met instelbare vergroting (2X, 4X)	•	
Draaiobjectief met 3:1 zoomfactor		•



SPECIFICATIES	RED30S RED39Z	
Optisch systeem		
Greenough	●	●
Tubus		
Binoculaire kop	●	●
Inkijkhoek		
45° gekanteld	●	
45° gekanteld, 180° draaibaar		●
Pupilafstand		
52-69mm	●	
51-77mm		●
Dioptrie aanpassing		
Op linker tubus, +/-5 dioptrie	●	
Op linker en rechter tubus, +/- 5 dioptrie		●
Objectief systeem		
Draaiobjectief met LED opvallend licht	●	
Zoom, factor 3:1		●
Objectief vergroting		
2X – 4X	●	
1X ~ 3X		●
Werkafstand		
50mm	●	
60mm		●
Statief		
Vast model	●	●
Voet		
225 x 179mm	●	●
Kolom/arm		
200mm hoog	●	
202mm hoog		●
Kophouder		
Vast	●	
Voor Ø66mm binoculaire kop met LED verlichting, opvallend licht		●
Scherpteregeling		
Grofregelknoppen met instelbare stroefheid	●	●
Focus afstand		
46mm		●
47mm	●	
Verlichting opvallend		
LED 3,5V / 110mW, regelbaar	●	●
Verlichting doorvallend		
LED 3,5V / 100mW, regelbaar	●	●

ACCESOIRES

RED30 SERIE



OCULAIRES (PER STUK)

- Widefield oculair WF5X/22mm
- Widefield oculair WF10X/20mm
- Widefield oculair WF15X/13mm
- Widefield oculair WF20X/10mm
- Widefield oculair WF30X/8mm

MICROMETER OCULAIRES

- Micrometer oculair WF10X/20mm, 14mm verdeeld in 140 delen, met draadkruis
- Micrometer oculair WF10X/20mm, 14mm verdeeld in 70 delen
- Micrometer oculair WF10X/20mm, 360° gradenboog met verdeling in 1° en draadkruis
- Micrometer oculair WF10X/20mm, 10mm verdeeld in 100 delen

MICROMETERPLAATJES

- Micrometerplaatje, 14mm verdeeld in 140 delen, met draadkruis (Ø23mm)
- Micrometerplaatje, 14mm verdeeld in 70 delen, met draadkruis (Ø23mm)
- Micrometerplaatje met 360° gradenboog met verdeling in 1° en draadkruis (Ø23mm)
- Micrometerplaatje, 10mm verdeeld in 100 delen, met draadkruis (Ø23mm)

RESERVEONDERDELEN

- Wit tafelplaatje, Ø50mm
- Zwart tafelplaatje, Ø50mm
- Matglas tafelplaatje, Ø50mm
- Stofhoes (maat B)
- Oogkapjes (per paar)
- Snoerhanger (per paar)
- Aluminium opbergkist

RESERVELAMPJES

- LED licht unit 3W bovenlicht voor RED30S
- LED licht unit 3W bovenlicht voor RED39Z
- LED licht unit onderlicht

MOTICAM SERIE

EXCELLENTE LIVE BEELDEN VOOR IN HET BIOLOGIEONDERWIJS



De individuele situatie verschilt per klaslokaal. Het beschikbaar stellen van goed beeldmateriaal is daarentegen een taak voor elke docent. De combinatie van een RED-Line microscoop met een Moticam camera stelt u in staat om geweldig beeldmateriaal te tonen en te delen, voor bijvoorbeeld presentaties of discussies. Het camera pakket omvat ook de gebruiksvriendelijke Motic Images Plus software waarmee u beelden kunt bewaren en video's kunt opnemen naast vele andere mogelijkheden. Levende objecten kunnen dus op een geheel eigen manier in de klas worden behandeld.

Bij een groepsgewijze benadering van uw les kunt u kiezen uit twee manieren voor Wi-Fi data transfer. De Moticam X, die het toelaat meerdere tablets of computers aan te loggen op één microscoop zodat maximaal 6 leerlingen hun eigen device kunnen inzetten en gebruiken voor hun huiswerk of de Moticam X2, de meer geavanceerde versie. Het verschil is dat de X2 een eigen accu heeft en hij kan geïntegreerd worden in uw bestaande netwerk via Wi-Fi of via een UTP kabel zodat een groter aantal leerlingen kunnen verbinden. Bewaar, bewerk en deel de beelden met onze gratis MotiConnect App.

Uw microscoop uitrusten met een Moticam is erg eenvoudig: dankzij de oculair adapter kunt u zelfs een monoclulaire microscoop als bron gebruiken. Trinoclulaire RED-Line microscopen zijn standaard uitgerust met de benodigde c-mount adapter voor de camera.

Ontdek de mogelijkheden en de voordelen van het uitrusten van uw RED-Line microscoop met een Moticam camera. Vermenigvuldig uw onderwijsmogelijkheden, verbeter uw onderwijs efficiency!

Onze Moticam selectie geschikt voor uw situatie



Zoekt u nog meer functionaliteit?

Vraag naar onze complete range Moticam camera's

MOTICAM S2 & T2



VERANDER UW MICROSCOOP MET DEZE TOUCHSCREEN
TABLETCAMERA'S IN EEN STANDALONE DIGITAAL MICROSCOOP
SYSTEEM, ZONDER DAT U EEN COMPUTER NODIG HEEFT




S2 & T2 TABLETCAMERA'S

Deel de microscoopervaring met anderen om u heen, docenten of studenten, door simpelweg deze tabletcamera's op uw microscoop te monteren en maak uw microscoopervaring uniek.

7" (MotiCam S2) of 10,1" (MotiCam T2) multi-touchscreen tablets die draaien onder het Android systeem, vooraf voorzien van de Moticonnect T App die u draadloos beelden laat delen met anderen via Wi-Fi, Bluetooth of HDMI verbinding.

In slechts één klik maakt u opnames van hoge kwaliteit en kunt u deze meten, bewerken of opnemen als HD video's. Dit alles met slechts een vingerbeweging!

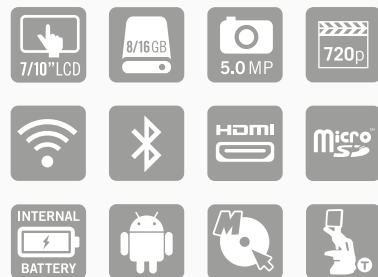

RED50X • WI-FI DIGITALE MICROSCOOP

BASIS MICROSCOOP MET GEÏNTEGREERDE WIFI CAMERA (1,3MP) MAAKT UW
LESSEN INTERACTIEF EN PLEZIERIG



Optisch systeem	Tubuslengte 160mm
Tubus	Monoculair met ingebouwde Digital X Wi-Fi camera
Inkijkhoek	30° gekanteld, 360° draaibaar
Camera sensor	CMOS 1/3" - 1,3MP - 1280 x 1024 pixels
Data uitvoer	Wi-Fi transmissie maximaal 1,3MP
Oculairs	WF 10X/18mm
Revolverkop	Omgekeerde drievoudige revolverkop, vastklikkend
Objectief type	Achromatische objectieven, DIN
Objectieven	4X/0,10 - 10X/0,25 - 40X/0,65/S (met borging)
Objectief schroefdraad	W 4/5" x 1/36" (RMS standaard)
Tafel	Horizontaal beweegbare tafel met 'one touch' preparaatklem
Tafel formaat	Ø105mm
Condensor	Ingebouwd 0,65 N.A. met schijf diafragma
Scherpteregeling	Grof instelknoppen
Z-as beweging	8mm
Verlichting	LED 20mA, 3,5V, 70 mW met intensiteitscontrole
Voeding	Lader 100V/240V (CE) met oplaadbare accu's





Canada | China | Germany | Spain | USA



www.moticeurope.com

EN | ES | FR | DE | IT | PT | NL

Motic Instruments Inc. (Canada)

130 - 4611 Viking Way, Richmond, BC V6V 2K9 Canada
Tel: 1-877-977 4717 | Fax: 1-604-303 9043

Motic Deutschland GmbH (Germany)

Christian-Kremp-Strasse 11, D-35578 Wetzlar, Germany
Tel: 49-6441-210 010 Fax: 49-6441-210 0122

Motic Hong Kong Limited (Hong Kong)

Rm 2907-8, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: 852-2837 0888 | Fax: 852-2882 2792

Motic Spain, S.L. (Spain)

Polígono Industrial Les Corts, Camí del Mig, 112 08349 Cabrera de Mar, Barcelona, Spain
Tel: 34-93-756 6286 | Fax: 34-93-756 6287

*CCIS® is a trademark of Motic Incorporation Ltd.

Motic Incorporation Limited Copyright © 2002-2015. All Rights Reserved.

Design Change: The manufacturer reserves the right to make changes in instrument design in accordance with scientific and mechanical progress, without notice and without obligation.

Designed in Barcelona (Spain)

October 2015



VOS instrumenten
toepadweg 6 | 5301 KA Zaltbommel
www.vosinstrumenten.nl
+31 (0)418 - 575 080